



# Big Easy<sup>®</sup> ПИСТОН

БОЛЬШОЙ СТЕРЖЕНЬ, БОЛЕЕ УДОБНАЯ УСТАНОВКА



Разработан совместно с доктором Джэком М. Картуш

ХАРАКТЕРИСТИКА	ПРЕИМУЩЕСТВО
Отношение к МРТ*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Титан и платина обеспечивают совместимость с МРТ</li> </ul>
Платиновый стержень тройной ширины	<ul style="list-style-type: none"> <li>Благодаря более широкой площади поверхности протез легче закрепить захватывающими щипцами типа «аллигатор»</li> <li>Улучшенная, благодаря более широкой петле, стабильность протеза позволяет легче устанавливать и изгибать его</li> <li>Мягкая, широкая петля уменьшает риск некроза длинного отростка наковальни, благодаря распределению давления и устранению необходимости «излишнего обжима»</li> <li>Наличие площадки для захвата инструментом облегчает установку петли вокруг длинного отростка наковальни</li> </ul>
Платиновый стержень двойной ширины	<ul style="list-style-type: none"> <li>Более прочный и устойчивый стержень позволяет избежать поломок во время имплантации</li> <li>Эластичным платиновым стержнем удобно обогнуть вскрытый канал лицевого нерва</li> </ul>
Улучшенный обзор подножной пластинки стремени	<ul style="list-style-type: none"> <li>Более короткое тело из титана увеличивает видимость подножной пластинки стремени</li> <li>Отчетливый маркер глубины</li> </ul>
Изогнутые версии	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изогнутый стержень предназначен для установки в случае частичного некроза длинного отростка наковальни</li> <li>Доступны варианты с изгибом влево и вправо</li> </ul>

## Информация для заказа:


Продукт	Описание	Диаметр ст.	Длина	Qty
1156601	Прямой	0.5 мм	4 мм	1
1156602	Прямой	0.5 мм	4.25 мм	1
1156603	Прямой	0.5 мм	4.5 мм	1
1156604	Прямой	0.5 мм	4.75 мм	1
1156611	Левое ухо, Изогнутый	0.5 мм	4.5 мм	1
1156612	Левое ухо, Изогнутый	0.5 мм	4.75 мм	1
1156613	Левое ухо, Изогнутый	0.5 мм	5 мм	1
1156621	Правое ухо, Изогнутый	0.5 мм	4.5 мм	1
1156622	Правое ухо, Изогнутый	0.5 мм	4.75 мм	1
1156623	Правое ухо, Изогнутый	0.5 мм	5 мм	1



Прямой пистон



Изогнутый пистон

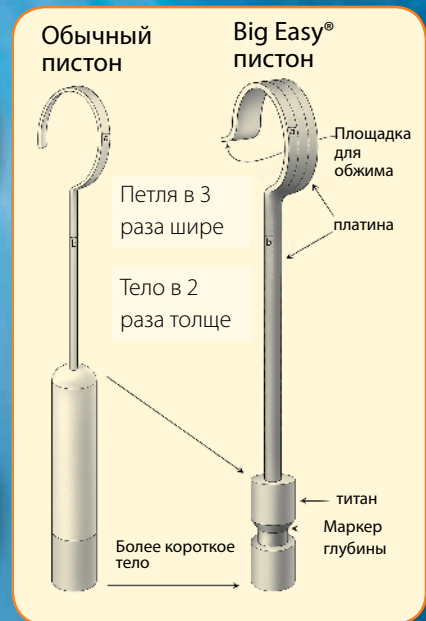

\* В магнитных полях 3.0 Тесла или менее.

## Вы ищете что-то еще?

Вы найдёте более 5000 изделий в каталоге продукции на веб-сайте: <http://www.mcatalogs.com/ent/>

Для получения более подробной информации, пожалуйста, позвоните в компанию Медтроник на номер: +7(495) 580 73 77 или обратитесь к нашим веб-сайтам: [www.medtronicnavigation.ru](http://www.medtronicnavigation.ru) или [www.MedtronicENT.com](http://www.MedtronicENT.com)

**ООО «Медтроник»**

123317, Москва,

Пресненская набережная, д. 10

Тел.: +7(495)580-73-77

Факс: +7(495)580-73-78

[www.medtronic.ru](http://www.medtronic.ru)

